

RUPEȚI

RUPEȚI

CELOX™ GRANULES

Granule hemostatice 15 g

Scop preconizat: a se utiliza numai de personal instruit pentru intervenții de urgență, în unități pre-spitalicești pentru tratamentul provizoriu al cazurilor de urgență cu sângerare care pune viața în pericol.

Grup țintă de pacienți: adulți și copii, cu excepția nou-născuților și a sugarilor.

PENTRU UZ EXTERN TEMPORAR



STERILE R



ro



MD



CE

Instrucțiunile de
utilizare de pe verso
[www.celoxmedical.com/
instructions-for-use-ifu](http://www.celoxmedical.com/instructions-for-use-ifu)

2797

Instrucțiuni de utilizare:

RUPEȚI

RUPEȚI



1 Purtați mănuși (dacă sunt disponibile).
Desfaceți ambalajul CELOX.




2 Înainte de aplicare, identificați și
aplicați presiune direct pe zona
principală de sângerare, apoi
indepartați urmele de sânge în
exces, acolo unde acest lucru este
posibil.



3 Turnați imediat întreg
conținutul plicului
peste plagă. Umpleți
peste nivelul pielii.



4 Timp de 5 minute, aplicați CU FERMITATE presiune direct pe plagă, cu ajutorul
tiftonului. În cazul în care sângerarea persistă sau reîncepe, aplicați presiune
direct timp de alte 5 minute. Puteți utiliza plicuri suplimentare, dacă plaga o
necesită sau dacă aveți alte plăgi care necesită hemostază de urgență.

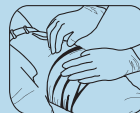

5 Strângeți și bandajați bine pentru a menține presiune asupra plăgii (conform
instrucțiunilor producătorului).

6 Transportați pacientul cât mai repede posibil într-o unitate medicală.

7 Arătați ambalajul personalului medical.

8 Eliminați orice parte neutilizată conform protocoalelor standard locale pentru
deșeuri biologice.

ATENȚIONĂRI PENTRU PERSONALUL UNITĂȚILOR MEDICALE:
Acesta este un produs solubil hemostatic, cu un grad foarte ridicat
de absorbție.

1. Îndepărtați fizic dopul de gel de pe plagă.
2. Înainte de irigare, îndepărtați granulele individuale prezente pe
suprafață.
3. Irigați în întregime zona plăgii cu soluție salină sterilă de
spălare.
4. Continuați cu irigarea și/sau aspirarea normală.
5. Înainte de a începe tratarea plăgii, asigurați-vă că ați îndepărtat
orice urmă de produs de pe plagă.
6. Eliminați dopul de gel scos și reziduurile conform protocoalelor
standard locale pentru deșeuri biologice.

Durată de utilizare: dispozitivul și reziduurile trebuie îndepărtate
din plagă în decurs de 24 de ore de la aplicare.

Atenționări și precauții: Exclusiv pentru uz extern. A nu se ingera. În
cazul ingerării, se recomandă consumarea unui pahar cu apă, pentru
a evita senzațiile de disconfort. Pierderea gradului de sterilizare poate
reprezenta pericol de infectare. A nu se rasteriza. Evitați inhalarea.
Nu aplicați în zona ochilor. În caz de iritație la nivelul ochilor, clătiți cu
apă timp de 5 minute. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Reutilizarea ar
putea reprezenta pericol de contaminare încrucișată și eficiență scăzută.
Conține chitosan provenit de la crustacee. Studiile privind alergiile
nu au arătat reacții adverse. Date aflate la dosar la Medtrade
Products Ltd.

Contraindicații: A nu se utiliza în cazul plăgilor abdominale sau în cazul
plăgilor care nu răspund la presiune. A nu se aplica în cavitatea corpului.
Dispozitivul nu este destinat uzului chirurgical.

Once incident grav care a avut loc în raport cu dispozitivul trebuie
raportat producătorului și autorității competente din statul membru în
care utilizatorul și/sau pacientul este stabilit.

Rezumatul caracteristicilor de siguranță și performanță clinică (SSCP)
pentru dispozitiv este disponibil în Baza europeană de date referitoare
la dispozitivele medicale (Eudamed), unde este asociat cu UDI-DI de
bază. Site-ul web al Eudamed este <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>,
iar UDI-DI de bază este 506020663BP0993020037.

UDI

Medtrade Products Ltd,
Electra House, Crewe Business Park,
Crewe, CW1 6GL, UK
www.celoxmedical.com

EU REP Obelis S.A., Bd. Général Wahis 53,
1030 Brussels, Belgium

MedEnvoy Global BV, Prinses
Margrietplantsoen 33 – Suite 123,
2595 AM The Hague, The Netherlands

REF FG08830641
MTP-25-2903
Data publicării: 22-Ian-2026

CELOX™ is a trademark of Medtrade Products Ltd. All rights reserved.